

Tăng sức mạnh cho Resolve

Phần mềm Agilent Command Fleet Management



Sức mạnh của Resolve nằm trong tay bạn

Thiết bị quang phổ cầm tay Agilent Resolve Raman là một công cụ mạnh mẽ để nhận dạng mẫu nhanh chóng, dễ dàng và đáng tin cậy khi đang di chuyển.


Phần mềm Agilent Command Fleet Management cho phép bạn tùy chỉnh khả năng phát hiện của mình cho ứng dụng định trước của bạn.



Phần mềm Agilent Command Fleet Management được thiết kế để nâng cao khả năng sử dụng thiết bị phổ Raman cầm tay Agilent Resolve của bạn, cho dù bạn là người sử dụng cuối hay người chỉ huy. Mỗi mô-đun được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của bạn với quy trình làm việc đơn giản, dễ làm theo. Hiện có hai mô-đun: Field User (hiện trường) và Management (quản lý). Các mô-đun hoạt động liền mạch với Resolve để tạo, quản lý và triển khai thư viện.


Field User (Hiện trường)

- Bao gồm trong bộ Resolve
- Thuận tiện cho việc tạo hàng loạt hoặc tạo tập tin đơn lẻ.

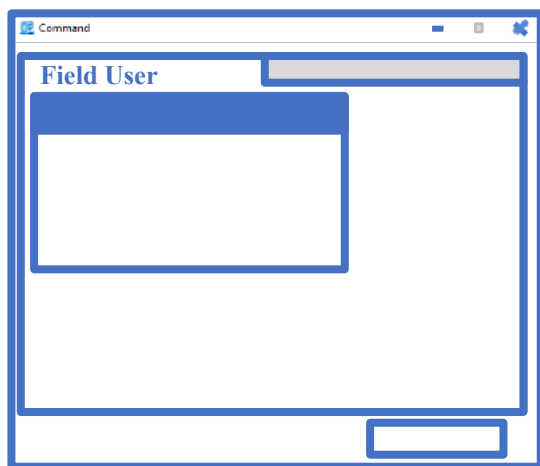

Management (Quản lý)

- Mô-đun nâng cao dành cho người chỉ huy và quản lý
- Quy trình làm việc giúp tạo thư viện dễ dàng

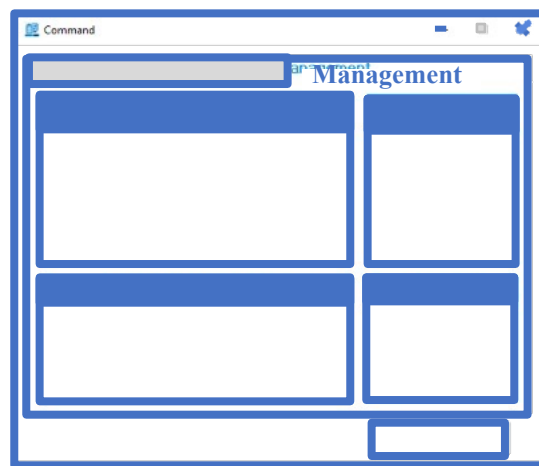

Đặc điểm của phần mềm Command Management



Dễ dàng tạo hàng loạt hay các file đơn lẻ từ cơ sở dữ liệu của Resolve. Dạng file: CSV, PDF, SPC.



Gửi các file Reachback đến Agilent để được hỗ trợ về phổ và kết quả.



Thay đổi mật mã, cài đặt và thư viện đang hoạt động cho bất kỳ Resolve nào trong đội của bạn.



Sử dụng dữ liệu quét Resolve để tạo các mục thư viện mới



Thêm thông tin về mối nguy hiểm và hóa chất để hiển thị trên các trang megadata của Resolve. Tạo nhóm (class) mối nguy hiểm tùy chỉnh



Tạo các mục thư viện mới trong thư viện và phân phối tới các Resolve trong nhóm của bạn.



Hay mang Resolve theo bên bạn

Resolve và các thư viện tích hợp của nó được thiết kế cho các ứng dụng nhận dạng hóa chất nguy hiểm và ứng phó sự cố.

Command Management mở rộng phạm vi khả năng phát hiện mạnh mẽ của Resolve bằng cách cho phép người dùng tạo thư viện của riêng họ.




Phần mềm Agilent Command Fleet Management


Tất cả những gì bạn cần để tạo thư viện phát hiện mới là một số nguyên liệu phù hợp cho việc thu thập dữ liệu ban đầu bằng cách sử dụng máy phân tích Resolve. Tùy vào ứng dụng, các nguyên liệu này có thể là các chuẩn được chứng nhận, hỗn hợp cụ thể hoặc mẫu pha loãng được quan tâm hoặc bất kỳ hoạt chất Raman nào khác ở nồng độ đủ cao.

Quét các nguyên liệu này và chuyển dữ liệu từ Resolve sang máy tính của bạn. Với quy trình làm việc đơn giản, mô-đun Command Management sẽ hướng dẫn bạn các bước để tạo các mục thư viện mới, thêm thông tin bổ sung và đóng gói chúng vào các thư viện có thể triển khai trên Resolve. Tải thư viện mới lên đội nhóm Resolve của bạn và bạn đã sẵn sàng.


Tạo thư viện Command

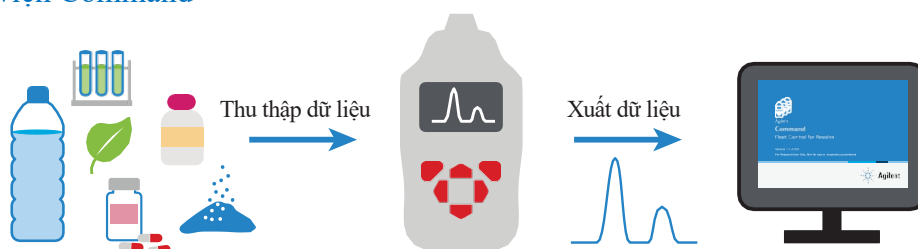

Tạo phần mềm quản lý

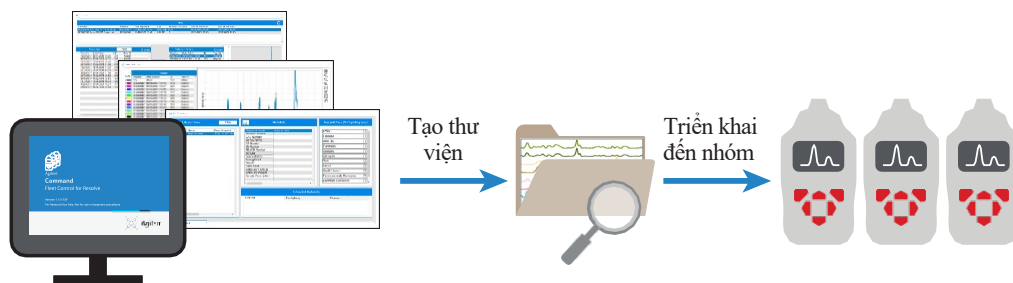

Phân tích chất chưa biết

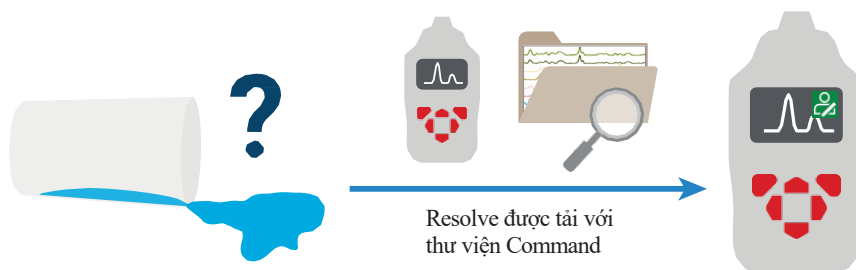

Tìm hiểu thêm:

CÔNG TY TNHH SAO ĐỎ VIỆT NAM
CHI NHÁNH CMS (REDSTAR-CMS)

Hotline: +84986 712 712

Email: info@redstar-cms.vn

Website: www.redstar-cms.vn

CHI NHÁNH HÀ NỘI

Tầng 3, tòa nhà Hà Nội Paragon,

Số 181 Trần Quốc Vượng, P. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Tòa nhà Vạn Đạt, Lô II-1,

Đường số 8, Nhóm CN 2, KCN Tân Bình,

P. Tây Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

DE41172423

This information is subject to change without notice.

© Agilent Technologies, Inc. 2023 Published
in the USA, November 15, 2023 5994-
6884EN